


دستور العمل نحوه استفاده از دستگاه تزریق خودکار (Physioject™)

CinnoRA®  
Adalimumab

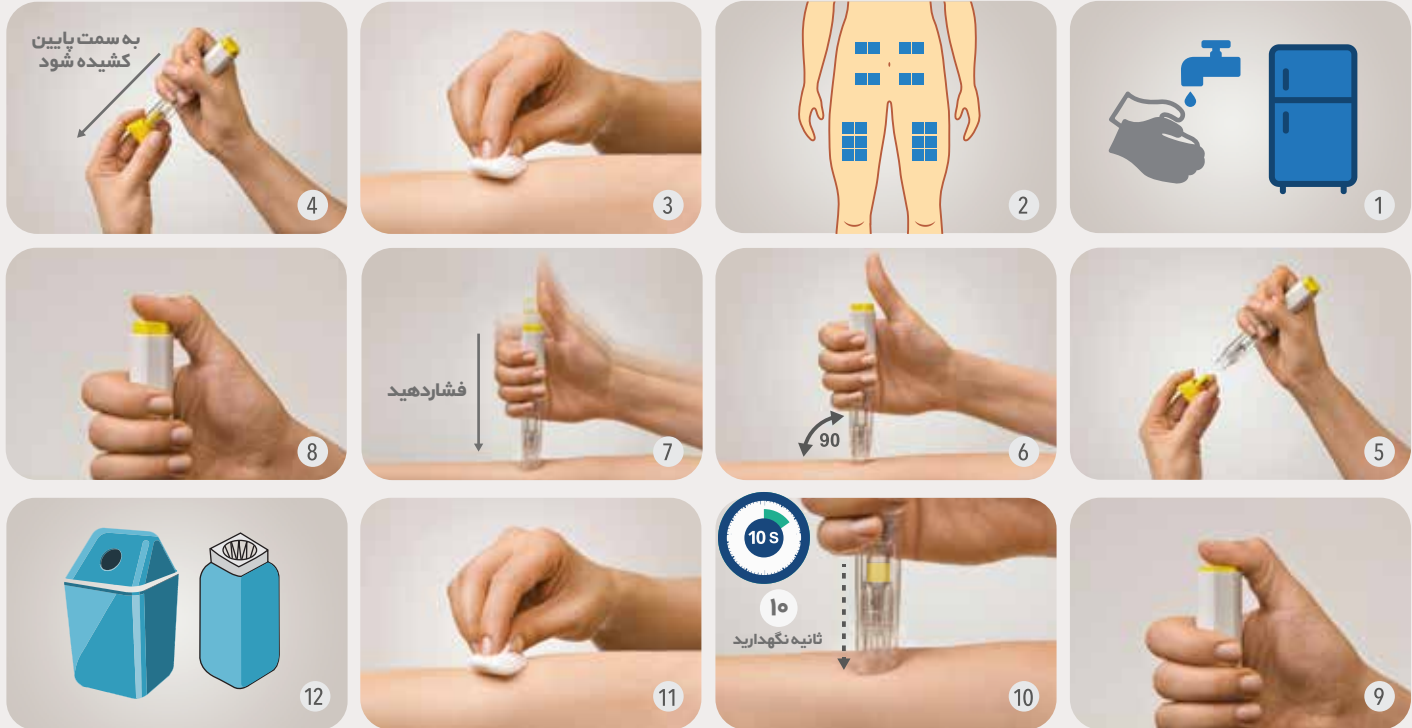

### نکات مهم

- 1- دستگاه تزریق خودکار را در یخچال و دور از دید و دسترس کودکان نگه دارید
- 2- دستگاه تزریق خودکار را از نور مستقیم خورشید محافظت کنید.
- 3- دستگاه تزریق خودکار برای تزریق یک دوز دارو است و تنها برای یک بار تزریق قابل استفاده است.
- 4- در صورتی که به هر دلیل تزریق با موفقیت انجام نشد، در اسرع وقت با پزشک، مرکز درمانی یا مرکز حمایت از بیماران ارکید فارمد تماس حاصل فرمایید.
- 5- به یاد داشته باشید، این دستگاه برای تزریق راحت توسط خودتان طراحی شده است، اما برای تزریق پار اول، آمونش های لازم را از پزشک، داروساز یا پرستار خود، درخواست کنید. همچنین می توانید برای آموزش رایگان تزریق به یکی از مراکز حمایت از بیماران ارکید فارمد مراجعه فرمایید.
- 6- تزریق زیرجلدی ممکن است باعث درد زودگذر و یا کبودی اندکی در ناحیه تزریق شود.

### توصیه می شود

محل مورد نظر برای تزریق را مطابق شکل با انگشت شست و اشاره، به سمت داخل فشار دهید تا مقداری برآمدگی بر روی پوست ایجاد شود و تزریق ها را در محل برآمدگی انجام دهید.




- 1 دستگاه را از یخچال خارج کرده و مدتی صبر کنید تا هم دمای محیط شود .
- دست های خود را به خوبی بشویید .
- بهترین نواحی برای تزریق عبارتند از قسمت بالا و بیرونی ران نواحی پایین شکم ، با فاصله از اطراف ناف در هر بار تزریق بخش متفاوتی از نواحی ذکر شده را برای تزریق انتخاب کنید .
- 3 سطح مورد نیاز از پوست را با پد الکی ، ضد عفونی کنید .
- 4 قسمت نگهدارنده دستگاه تزریق خودکار را طبق تصویر نگه دارید .
- 5 از دست دیگر خود برای برداشتن درپوش دستگاه استفاده کنید .
- 6 سر قسمت شفاغ دستگاه تزریق خودکار را با زاویه 90 درجه روی پوست قرار دهید .
- 7 دستگاه تزریق خودکار را تا جایی روی پوست **فشار دهید** که دکمه فوقانی رها شود ( تا زمانی که فشار مناسب به پوست اعمال نگردد، دکمه فوقانی عمل نمی کند ) .
- 8 شما الان برای تزریق آماده هستید .
- 9 دکمه را با انگشت شست یا انگشت اشاره فشار دهید و دستگاه را همان جا نگه دارید و به هیچ وجه تا پایان تزریق دستگاه را از روی پوست جا به جا نکنید .
- 10 تزریق شما با اطمینان از فشار دستگاه روی پوست و عدم خروج سوزن از پوست، **۱۰ ثانیه** به طول می انجامد. توجه داشته باشید اعمال فشار روی پوست هیچ گونه تاثیری بر میزان درد تزریق ندارد. از این جهت نگران نباشید.
- 11 پس از اتمام تزریق ، محل تزریق را با پنبه بپوشانید .
- 12 دستگاه استفاده شده را دور بیندازید .


قبل از مصرف تاریخ انقضا درج شده بر روی دستگاه را چک کنید.



در صورت شکستگی یا ترک از دستگاه استفاده نشود.

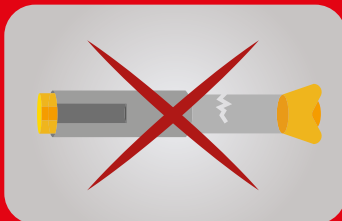

از فریز کردن دستگاه جدا خودداری شود.

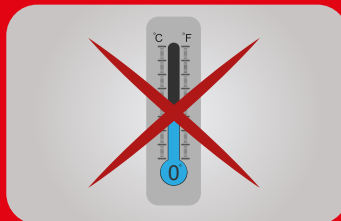

دستگاه را گرم نکنید .

